


# REVYLINЕ

## RL 200

### Ирригатор для полости рта

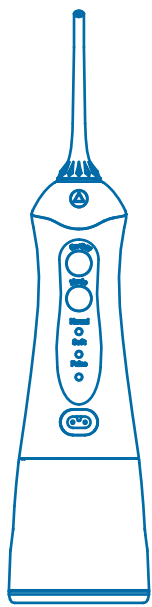

Благодарим вас за приобретение портативного ирригатора полости рта Revyline RL 200. Использование ирригатора существенно повышает уровень гигиенической защиты полости рта, предотвращает возникновение и развитие стоматологических заболеваний. Пульсирующий водный поток стимулирует кровоснабжение в деснах и улучшает их состояние. Сочетание высокого давления и пульсирующей технологии подачи воды помогает ирригатору Revyline RL 200 очищать межзубные промежутки, пришеечную область зубов и десневую борозду, что недоступно для обычной зубной щетки.

#### Меры предосторожности

Перед первым применением ирригатора Revyline RL 200 внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее.

#### Для предотвращения электротравм, ожогов, пожаров:

1. Не опускайте прибор в воду или другую жидкость.
2. Не используйте ирригатор во время принятия душа.
3. Не трогайте влажными руками зарядное устройство, подключенное к электросети.
4. Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в емкость с водой или раковину.
5. Не используйте прибор при неисправности зарядного устройства или повреждении силового кабеля.
6. Не направляйте поток воды под язык, в уши, нос или другие чувствительные участки. Прибор генерирует мощную водную струю, которая может нарушить целостность кожи и слизистых оболочек.
7. Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
8. Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.
9. Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.
10. Не включайте ирригатор в помещении, где ранее использовался кислород или аэрозоли.
11. Не заливайте в резервуар ополаскиватели, содержащие йод, масло, отбеливающие ингредиенты. Они снижают эффективность и срок службы прибора.
12. Заливайте в резервуар воду или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.
13. Перед использованием ирригатора удалите из полости рта все съемные конструкции.
14. Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.
15. Если вы принимаете антибиотики непосредственно перед проведением профессиональной гигиены полости рта, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед первым применением ирригатора или других средств по уходу за полостью рта.
16. Использование ирригатора детьми возможно только под присмотром взрослых.

#### Зарядка аккумулятора

Для зарядки аккумулятора необходимо вставить в гнездо зарядки разъем кабеля и подключить блок электропитания к электросети. Зарядку можно производить и через USB соединение. Для этого нужно отсоединить кабель зарядного устройства от блока питания и вставить его в USB разъем включенного электронного

устройства. При критичном разряде и во время подзарядки аккумулятора происходит мигание индикаторов режимов на дисплее корпуса. Прекращение мигания индикаторов свидетельствует о том, что зарядка аккумулятора завершена. При первом использовании прибора аккумуляторную батарею необходимо зарядить полностью. Также требуется полная зарядка, если прибор длительное время не использовался. Время полной зарядки аккумулятора составляет 4 часа.

**Внимание!** Во время зарядки аккумулятора пользоваться устройством нельзя.

#### Включение прибора

Откройте крышку резервуара, наклоните корпус так, чтобы входное отверстие было в горизонтальном положении и перпендикулярно направлению струи. Наполните резервуар кипяченой, очищенной водой. Закройте крышку резервуара. Для включения прибора 1 раз нажмите кнопку включения питания ON/OFF. Для выбора необходимого режима работы прибора используйте кнопку MODE. Для выключения ирригатора нажмите один раз на кнопку ON/OFF.

#### Выбор режима работы

Прибор может работать в трех режимах различного уровня давления жидкости:

##### NORMAL (Нормальный)

##### SOFT (Мягкий)

##### MASSAGE (Массаж)

Выбор режима осуществляется кнопкой MODE, что подтверждается включением соответствующего светового индикатора на ручке устройства.

После включения ирригатор будет работать в том режиме, какой использовался последним перед отключением устройства.

**Внимание!** В начале применения прибора рекомендуется использовать режим SOFT. Это поможет адаптироваться к ирригационной чистке и избежать риска появления воспаления и кровоточивости десен.


#### Установка и замена насадки

Установите насадку в разъем, расположенный на верхней части ирригатора, и надавливая поверните ее до полной блокировки. Для удаления насадки удерживайте нажатой кнопку блокировки и извлеките насадку из корпуса прибора.


**Внимание!** Не нажимайте кнопку извлечения насадки во время работы устройства.

#### Режим ирригации

Расположите насадку под углом 45 градусов к поверхности зуба. Включите ирригатор, направьте водную струю на область чистки. Вода должна естественным образом стекать из полости рта в раковину. Для получения лучших результатов вначале обработайте область боковых зубов, а затем передних. Продвигайте насадку вдоль контура десны, задерживая

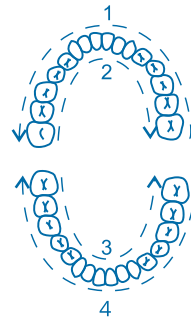


## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

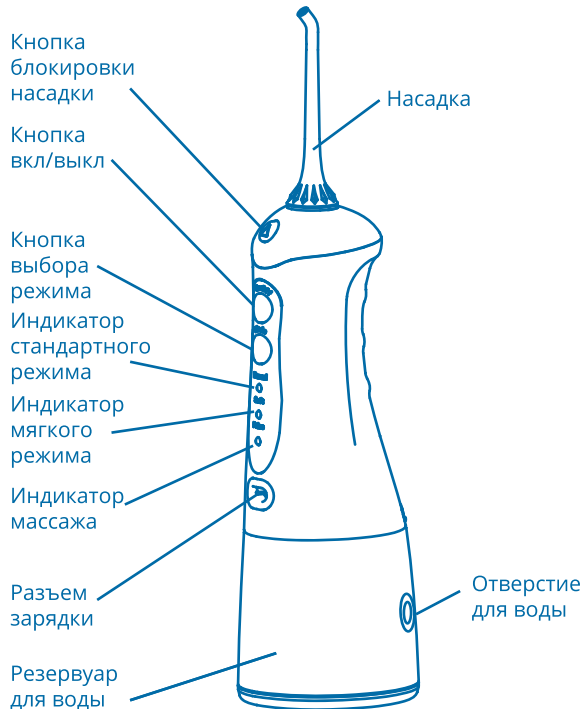

ее в межзубных промежутках.

Независимо от режима, после работы в течение 120 секунд устройство автоматически отключается.

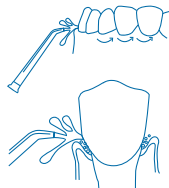

#### После завершения ирригации

Нажмите кнопку выключения питания. Слейте оставшуюся в резервуаре жидкость. При необходимости отсоедините резервуар от прибора. Для снятия резервуара необходимо взять корпус прибора в левую руку, а правой – повернуть резервуар против часовой стрелки так, чтобы метки на нижней части корпуса и верхней резервуара совпали.

#### Использование ополаскивателей и растворов

Для лучшего эффекта рекомендуется использовать ополаскиватели и специализированные бальзамы Revyline. Расчет дозировки производите согласно инструкции используемого средства. После каждого использования растворов необходимо промыть ирригатор.

**Внимание!** В состав некоторых ополаскивателей для полости рта входит спирт, который при длительном нахождении в системе прибора может повредить его детали и в конечном итоге, снизить срок его эксплуатации.

#### Уход и обслуживание

Не погружайте устройство в воду. Используйте мягкую ткань и мягкий неабразивный очиститель для очистки поверхности прибора. Для облегчения чистки резервуара, его необходимо отсоединить от корпуса. При регулярном использовании жесткой воды на деталях прибора могут образовываться известковые отложения. Для их ликвидации используйте специальное средство Revyline для очистки ирригатора, согласно инструкции по его применению. Производитель рекомендует проводить чистку ирригатора от одного до трех раз в три месяца в зависимости от жесткости воды.

Чтобы избежать травм или несчастных случаев, связанных с работой прибора, используйте только штатные детали и аксессуары, предусмотренные заводом-изготовителем.

#### Насадки в комплекте

В базовой комплектации прибора две стандартные сменные насадки. Они имеют кольца различных цветов, что позволяет идентифицировать насадки для каждого пользователя. После 3-6 месяцев регулярного использования насадка изнашивается и теряет эффективность. В этом случае ее необходимо заменить.

**Внимание!** Насадка должна быть строго индивидуальной. Совместное использование одной насадки различными пользователями не рекомендуется.

#### Гарантия

Гарантия на прибор 2 года. Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется

в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание ирригатора осуществляется за счет покупателя.

#### Гарантия не распространяется:

На расходные материалы и комплектующие. На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения их не по назначению; неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям; модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом); нарушением правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки указанным в руководстве по эксплуатации. На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильному источнику питания. На товары, эксплуатировавшиеся с неустраненными недостатками. На неисправности, которые вызваны независимыми от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь товаров посторонних предметов и жидкостей. На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.

#### Распространенные проблемы и их решение

##### Не извлекается насадка.

**Решение:** Во время извлечения насадки нажмите и удерживайте кнопку высвобождения насадки, расположенную на корпусе прибора.

##### Сложности выбора уровня напора струи.

**Решение:** После включения прибора выберите необходимый режим работы прибора. Для повышения эффективности ирригации используйте режим, не причиняющий вам дискомфорта. При воспаленных и слабых деснах используйте пародонтальную насадку.

##### Кровоточивость во время ирригации.

**Решение:** Кровоточивость является характерным симптомом воспаления десен. Не волнуйтесь. Прежде всего, необходимо выбрать режим работы ирригатора SOFT. Ирригатор удаляет зубной налет и бактерии из десен. При дальнейшем использовании кровоточивость прекратится.

##### Как предотвратить разбрызгивание воды?

**Решение:** Во время ирригации не стойте вертикально прямо с широко открытым ртом. Наклонитесь по направлению к раковине, приоткройте рот. Вода будет естественным образом выливаться из полости рта.

#### Комплектация

- Основной блок ирригатора Revyline RL200;
- Стандартная насадка – 2 шт;
- USB зарядное устройство;
- USB кабель;
- Дорожный чехол;
- Инструкция по эксплуатации.

ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА REVYLINЕ  
Модель: RL200

Предназначен для профилактики  
болезней зубов и десен

Уровень давления воды: от 210 до 700 кПа.

Частота пульсации: 1 400 – 1 800 в мин.

Ёмкость резервуара: 200 мл.

Влагозащита корпуса: IPX7.

Материал корпуса: ABS.

Уровень шума: ≤ 72 dB.

Питание: литиевая перезаряжаемая  
батарея 1400 mAh.

Время полной зарядки: 4 часа.

Потребляемая мощность: 5 Вт.

Размер: 22,5 x 7,2 x 5,0 см.

Вес: 540 г.

Товар не имеет срока годности.

Средний срок службы: 5 лет.

Гарантия: 2 года.

Хранить при комнатной температуре.

Произведено по заказу ИП Обушенков М.А.,  
г. Москва, ул. Бирюсинка, д. 13, корп. 1.

Изготовлено: Fly Cat Rlectrical Co.,Ltd. No.4 bldg,  
Xianyuxing industrial park, Gonghe community, Shajin  
Bao'an Shenzhen, China

Если у вас остались вопросы, обратитесь в сервисный центр.

8 (800) 700 53 60

www.revyline.ru

## Гарантийный талон

Название организации .....

Дата продажи.....

Место для печати